

Protemp™ Crown

Individuellt anpassade temporära kronor



En ny era inom
temporära kronmaterial

3M ESPE

Vanligaste skälen till att tandläkare* tycker att Pro-temp™ Temporära Kronor är enkla att arbeta med:

1. Inget avtryck eller kronform behövs
2. Inget kladd eller överskott
3. Lätt att forma ocklusalytan
4. Lätt att skapa approximala kontakter



Långt före sin tid: världens första formbara, prefabricerade temporära krona.

Den är inte bara ett dentalt mästerverk. Den är början på en ny era – innovativ, fängslande och spännande. 3M ESPE introducerar världens första prefabricerade, men formbara, temporära singelkrona i komposit. Den revolutionerande tekniken hjälper dig spara tid och öka produktiviteten.


Så enkelt som 1-2-3*.

Inget avtryck eller kronform. Ingen utrustning eller blandningsspetsar.

Protemp™ Crown Temporära Kronor har en universal färg och flera olika prefabricerade storlekar. För att skapa en temporär krona, välj lämplig storlek och anpassa kronan till den individuella orala situationen. Ljushärda, putsa och cementera med ett temporärt cement, som RelyX™ Temp NE Temporärt cement från 3M ESPE.



Trimma och anpassa.

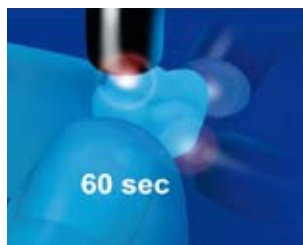

Ljushärda



Putsa och polera

* Se bruksanvisningen för detaljerad beskrivning av stegen..


Ytterligare egenskaper:

- 9 prefabricerade storlekar
- Individuell anpassning
- Ljushärdande
- Låg intraoral värmeutveckling
- Litet syreinhärdat lager
- Luktfri
- Lätt att bygga på med flytande komposit

Snabbt – Minskar tiden för framställning med upp till 50%.

Med Protemp™ Crown Temporära Kronor kan du skapa en temporär singelkrona på mindre än 4 minuter.

Tandläkare bedömer snabbheten.

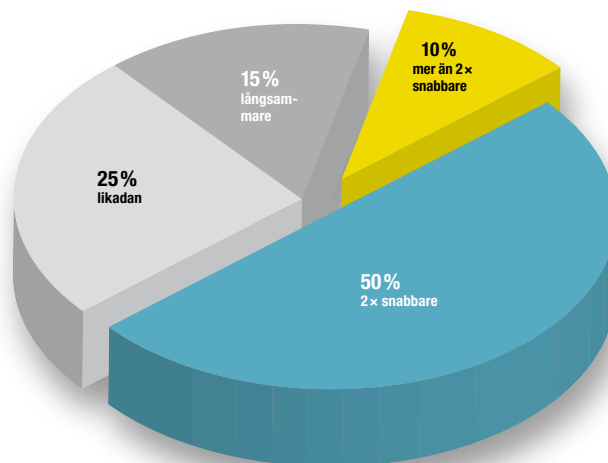

*Tandläkare som gör minst 15 temporära singelkronor per månad.

3M ESPE interna data från test med 105 tandläkare från hela världen..


Ännu en innovation från
ett företag du kan lita på.

Jämför vad du kan få på fyra minuter eller mindre.

	Protemp™ Crown Temporära Kronor	Bis-akrylat material	Pulver vätska-system
Singelkrona på fyra minuter	X	Tiden varierar starkt; beror av kronform/avtryck & temporärt material (vanligen > 8 min.)	
Ingen kronform/avtryck behövs	X		
Individuell passning	X	X	X
Prefabricerad anatomi	X		
Litet syreinhiberat lager	X		X
Estetiskt resultat	X	X	X
Låg intraoral värmeutveckling	X	X	
Härda när det passar	X		

Starkt – Imponerande styrka.

Jämfört med andra temporära material har Protemp™ Crown totalt sett en imponerande styrka och hållbarhet. Tester visar höga värden för tryck-, drag- och böjhållfasthet, såväl som höga värden för frakturmotstånd.

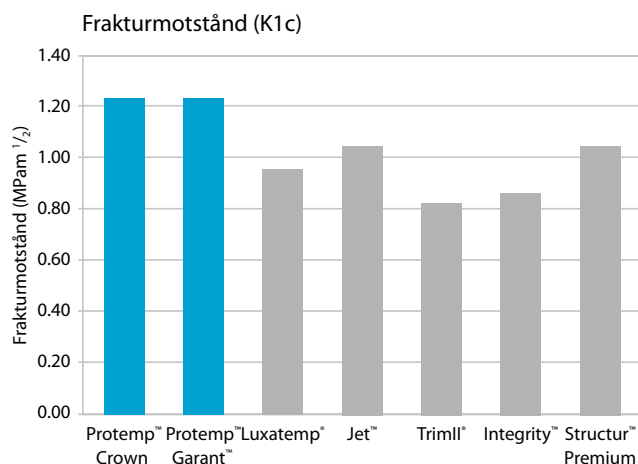

Frakturmotståndet bidrar till hållbarheten för ett temporärt material. Måttet visar den energi som krävs för att en spricka skall propagera i materialet.

Källa: DeLong; University of Minnesota, MDRCB

Estetiskt – Ger en tandfärgad restaurering.

Med sin tandlika färg och prefabricerade form ger Protemp Crown en temporär restaurering med naturlig estetik. Kronorna kan anpassas och/eller repareras med t ex Filtek™ Supreme XT Flytande komposit eller konventionell komposit och kan poleras till en blank tandliknande yta.

Vad tandläkare säger.

“Att göra provisorier är bekvämt nu när inget preliminärt avtryck behövs. **Med denna nya revolutionerande process gör jag enkelt, snabbt och lätt temporära kronor som passar väl, är snälla mot vävnaderna och, efter min erfarenhet, håller ocklusionen och lossnar inte. Definitivt en vinnare från 3M ESPE!**”

Joseph A. Blaes, DDS

“**Detta är ett paradigmskifte för provisorier.** Adjektiven räcker inte för att förklara den praktiska nyttan av en sådan här produkt. **En total succé med högkvalitativa temporära restaurationer.**”

Robert G. Ritter, DMD



Foto: Donald M. Erickson, DDS.

Protemp™ Temporära Kron- och bromaterial: Lösningar för alla dina temporära behov.

Protemp™ 3 Garant™ – Komposit till Temporärt Kron- och bromaterial

Idealiskt för flerleds anteriora applikationer.


Den perfekta balansen av styrka och flexibilitet.

- Imponerande styrka och hållbarhet
- Förstklassigt frakturmotstånd
- Precisionspassning
- Utmärkt estetik

Restorative Dental Materials; 11th edition; R. Graig, J.M. Powers; pp. 80;

Applied Dental Materials; 8th ed. J.F. McCabe, A.W.G. Walls, p.9.

* Data Source: 3M ESPE internal testing

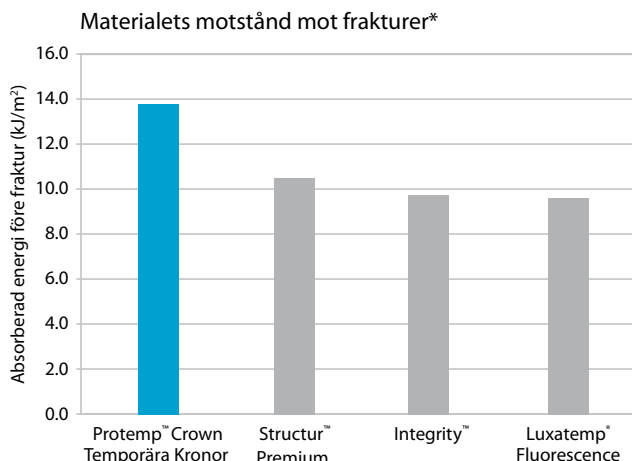

Beställningsinformation



Protemp™ Crown Temporära Kronor
Introduktionskit



Protemp™ Crown Temporära Kronor Testkit



Protemp™ 3 Garant™ Temporärt Kron- och
Bromaterial Introduktionskit

Art. nr.	Beskrivning
	Protemp™ Crown Temporära Kronor
50600SAM	Promotional Kit 1 – 50600 Kit 42 Temporära Kronor; mätstickor (10 st); Instruktioner; Teknikguide; kronlåda; märklappar för kronlåda Kronstorlekar: 6x Stora ÖK-Molarer, 6x Små ÖK-Molarer, 6x Stora UK-Molarer, 6x Små UK-Molarer; 4x Stora ÖK-Premolarer, 4x Små ÖK-Premolarer, 4x UK-Premolarer; 3x stora caniner, 3x små caniner 1 – 50613 Refill 5 Temporära Kronor Små UK-Molarer; Instruktioner; mätstickor
50600TK	Testkit 16 Temporära Kronor; mätstickor (10 st); Instruktioner; Teknikguide; Kronstorlekar: 3x Stora ÖK-Molarer, 3x Små ÖK-Molarer, 2x Stora UK-Molarer, 2x Små UK-Molarer; 2x Stora ÖK-Premolarer, 2x Små ÖK-Premolarer, 2x UK-Premolarer
	Refill
50610	Molar ÖK Stora 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50611	Molar ÖK Små 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50612	Molar UK Stora 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50613	Molar UK Små 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50614	Premolar ÖK Stora 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50615	Premolar ÖK Små 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50616	Premolar UK 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50617	Canin Stora 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
50618	Canin Små 5 Temporära Kronor; Instruktioner; Teknikguide
	Protemp™ 3 Garant™ Temporärt Kron- och Bromaterial
46931	Introduktionskit A3 1 Patron 50 ml; 15 Garant mixing tips, blå; 1 Garant Dispenser 4:1/10:1

3M ESPE

3M ESPE
3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
E-Mail: 3msvenskaab@mmm.com
Internet: www.3mespe.com/se

3M, ESPE, Filtek, Garant, Protemp och RelyX är varumärken hos 3M eller 3M ESPE AG.

Integrity, Jet, Luxatemp, SNAP, Structur och Trim är inte varumärken hos 3M eller 3M ESPE AG

© 3M 2007. Alla rättigheter reserverade.