

Desinfektion

Använd klorfritt desinfektionsmedel för att torka och desinficera värme ålen. Kaviciddesinfektionsmedel rekommenderas.

Torkning

Efter rengöring och desinfektion, vänligen torka, det rekommenderas igen
- gärning för att använda tryckluft för att torka.

Sterilisering

- 1.Steriliserbara delar: Pennspetsar
- 2.Före sterilisering, använden steriliseringspåse som uppfyller kraven i nationella förpackningsbestämmelser.
- 3.Steriliseringmetod: ångsterilisering vid höga temperaturer
- 4.Steriliseringförhållande: 134°C i inte mindre än 5minuter.

Förklaring av garantin

Som tillverkare kommer vi att ta ansvar för den defekta produkten som orsakas av material- och tillverkningsprocessen, endast om den fortfarande ligger inom 1 års garanti.

batteri i 6 månader.

Eventuella skador som orsakats av den obehöriga tredje parten, kommer inte att ta något ansvar!

Driftsmiljö och förvaring, Transportförhållanden

Driftsmiljö (olika)

Omgivningstemperatur: +5°C -+40°C
Relativhumiditet: 20%-80%
Luftryck: 860 hPa-1060hPa

Transport- och lagringsförhållanden

Omgivningstemperatur:+5°C-+40°C
Relativ mänsklighet:≤93%

Teknisk parameter

- 1.Storlek påhandtag: Längd: 126mm3:19mm
 - 2.Strömspanning: 230V / 50Hz eller 110V / 60HZ
 - 3.Inngangseffekt:5 W
- Elektriskt stötskydd: TypB

Atervinning och bortskaffande

- Kassera använd utrustning i enlighet med landets (regionens) regler och standarder.Se till att alla komponenter inte är kontaminerade vid bortskaffande.

Symboler




Varning



Varning



Vertikal

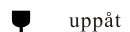

uppåt



Bräcklig



Keepdry, det är jag!



Weee



Foshan COXO Medical Instrument Co.,Ltd

Address: BLDG 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan, 528226 Guangdong, China
E-mail:coxotec@163.com
Http://www.coxotec.com



Lotus NL B.V

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA ,
The Hague, Netherlands.
Email:peter@lotusnl.com



Utrustning av klass II (adapter)



Se bruksanvisningen/häftet Typ B-



utrustning



Använd endast inomhus




Direkt



CE-märkt produkt

Gutta skär

C-BFack

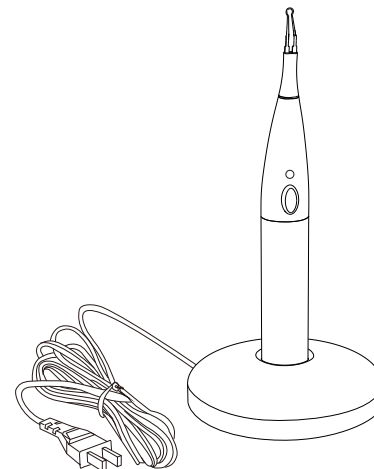

Säkerhetsföreskrifter

Varning: Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder denna utrustning, som hjälper dig att använda den korrekt.

1. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder denna utrustning.
2. Använd apparaten i enlighet med avsedd användning. Tillverkaren taringet ansvarar omanvändaren inte använder apparaten i enlighet med anvisningarna eller använder apparaten för andra ändamål.
3. När du använder en extern strömförsörjning, se till att v-oltaget ligger inom det spänningsområde som anges på enheten för att undvika skador på operatören eller patienten.
4. Rör inte patientens läppar, tandkött eller slemhinnor med mjuka vävnader för att undvika skällning till operatören eller patienten. Apparaten måste användas utanför patientens mun.
5. Vidrör inte den uppvärmda värme ålen med brandfarliggaser eller vätska, annars kan det orsaka brandfara.
6. Denna utrustning kan inte användas i miljöer med brandfarliga gaser.
7. Sänk inte ned apparaten i vätska..
8. Om det finns ett vätskeläckage från utrustningen, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren och den auktoriserade återförsäljaren för bortskaftande.
9. Hjärtsjukdomar, gravid kvinnor och barn ska användas tillsammans med acation.
10. Denna utrustning är endast för professionell.

Standardkonfiguration

Guttacutter hndtak	1
Laderbase	1
Pennetips(4st)	1

Avsedd användning

Denna produkt är endast tillgänglig för den välutbildade tandläkaren och tandläkarlaboratoriet som är för kirurgi för att fylla rotkanalen, som används för att skära den extra guttaperkan från rotkanalen.

Kontraindikationer (kontraindikation)

Personer som implanteras med pacemaker eller annat system är förbjudna!

Instruktioner

Kontrollera om strömkällans spänning motsvarar utrustningen före laddning.

Ladda

1. Anslut först laddaren till strömkällan.
2. Sätt in enheten i laddningsbasen, när enheten är inne i laddningsfacket, tändsljusindikatorn på handtaget.

Beskrivning av batteriet

1. Innan du använder enheten för första gången, se till att den är fulladdad.
2. Ladda inte batteriet när det är slut.
3. För att ladda enheten helt bör laddningstiden vara mer än 12 timmar.

Drift under arbete

1. Pennspetsen på enheten, den böjda delen framtropen är rippsett till knappen, vilket gör arbetet enklare.
2. Pennspetsarna skamonteras på handtaget under kyltillstånd (och knappen ska inte användas under installationen), använd den böjda delen från spetsen för att klippa guttapercha.
3. Kontrollera att pennspetsen är väl installerad för användning. Rengöring: Spetsen är lätt att rengöra efter några sekunders värme.

4. När killarna percha skärs, släpp knappen, vänta tills spetsens valnarinna du tar bort den från patienten. Funktionsknappen "kontaktknapp", enheten slutar fungera efter att knappen har släppts.

Säkerhetsåtgärder

1. När pentip fortsätter på enheten, vännligstikke bebetenden.
2. Om kraften är för stark under behandlingen skulle det vara dåligt för pennspetsens livslängd.
3. Elektromagnetisk bör undvikas
4. Modifiera inte enheten på någotsätt.

Rutinunderhåll

1. Febernålar måste rengöras, desinficeras och steriliseras före och efter varje patients användning.
2. Om värme ålen inte alstrar värme, stoppa omedelbart driften och kontrollera om värmespetsen på värme ålen är defekt. Om det finns ett misstag måste du ersätta den med en ny värme ål i tid.
3. Om laddningsindikatorn inte är tänd kontrollerar du om laddningsstativet är anslutet till strömkälla.
4. Febernålen kan steriliseras 25 gånger vid högtemperatur och autoklav, varjegang steriliseras vid 134°C i inte mindre än 5 minuter.

Rengöring, desinficering och sterilisering

Rengöring

1. Använd en bomullspinne för att ta bort den återstående tandgelen från värmen.
2. Fördjupa dig med en enzymrengöringsmedel i 5 minuter efter sköljning.
3. Skölj med mjukt vatten efter blötläggning och