

GC Fuji IX GP och GC Fuji IX GP FAST

Ett glasjonomer fyllningsmaterial som skapat den GYLLENE STANDARDEN, vilket bevisas av att det tills idag applicerats mer än 100 miljoner fyllningar över hela världen



GC Fuji IX GP

Kapslar: Förpackning med 50 st (min blandad mängd per kapsel: 0.12ml)

Pulver - vätska: 1-1 förpackning med 15g pulver och 6.4ml vätska

Refillförpackning: Flaska med 15g pulver, flaska med 6.4ml vätska
VITA färger som finns: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

GC Fuji IX GP FAST

Kapslar: Förpackning med 50 st (min blandad mängd per kapsel: 0.12ml)

VITA färger som finns: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

VITA® är ett registrerat varumärke av Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen

Tillbehör för optimala resultat

För applicering:	Capsule Applier II
För att förbättra adhesionen:	Cavity Conditioner och Dentine Conditioner
För att förebygga uttorkning:	Fuji Coat LC eller Fuji Varnish
För att förbättra adhesionen:	Cavity Conditioner och Dentine Conditioner
För att förebygga dehydration:	Fuji Coat LC eller Fuji Varnish

FYSIKALISKA EGENSKAPER	GC Fuji IX GP FAST	GC Fuji IX GP
Pulver/vätska relation g/g	0.36/0.10	0.35/0.10
Blandningstid	10"	10"
Arbetstid	1' 15"	2'00"
Putsas efter	3'00"	6'00"
Tryckhållfasthet*	268 MPa	220 MPa
Diametral draghållfasthet *	23 MPa	22MPa
Adhesion till emalj hos nötkreatur*	6.9 MPa	5.9 MPa
Adhesion till dentin hos nötkreatur*	5.8 MPa	4.4 MPa
Löslighet i vatten	0.02%	0.02%
Löslighet i mjölksyra	0.21%	0.21%
Ythårdhet (vickers)*	74	74
Röntgenkontrasterande	Ja	Ja

* efter 24 timmar

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
E-mail info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
Scandinavian Office
Kungsposten 4 A
S - 427 50 Billdal
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
E-mail info@scandinavia.gceurope.com
www.scandinavia.gceurope.com

GC
FIRST IS QUALITY



GC Fuji IX GP FAST
Stoppbart glasjonomer fyllningsmaterial

9 skäl varför det här
blir ditt 1 val

GC
FIRST IS QUALITY

GC Fuji IX GP och

Den GYLLENE STANDARDEN för

GC Fuji IX GP
har tagits fram
för att ge dig
det bästa av
allting.

Det här är
förklaringen
till varför det
bör vara ditt
1 val . . .



1. MÅNGFACETTERAT

- Permanenta och temporära posteriora fyllningar
- Idealiskt för både barn och äldre patienter
- Pelarupbyggnader, underfyllningar eller som liner
- Som dentinersättning



2. ENKLT OCH SNABBT ATT APPLICERA

- Stoppbar konsistens möjliggör precis applicering i kaviteten för optimal försegling, kletar inte till instrumentet
- Tack vare den kemiska stelningen hanteras stora kaviteter snabbt
- Välj själv stelningstid
 - 6 min med 'normal stelning' Fuji IX GP eller
 - 3 min med 'snabbstelning' Fuji IX GP FAST
- I kapslar; enkelt och rationellt




3. STARK KEMISK BINDNING

- Unikt för Fuji IX GP är den blanka, fuktiga ytan efter blandning som helt synligt visar att det finns tillräckligt med fri polyakrylsyra för ett omedelbart och effektivt jonutbyte mellan dentin, emalj och Fuji IX GP
- Varken ets, bonding eller ljushärdning behövs
- Varken helt torr tandsubstans eller kofferdam behövs



4. LÅNGVARIG HÅLLBARHET

- Fuji IX GP har hög tryckhållfasthet och ythårdhet
- Stressabsorberande fysikaliska egenskaper ger lång hållbarhet

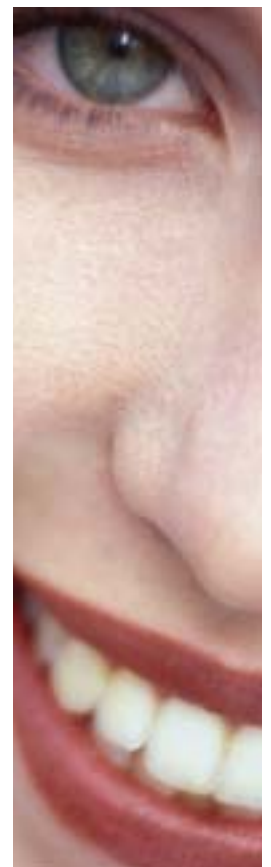

h GC Fuji IX GP FAST

ör fyllningar med glasjonomer



5. INGET MIKROLÄCKAGE

- Perfekt kantanslutning försäkrar dig en tät, kemisk bakteriefri försegling
- Hög draghållfasthet i kombination med flexibilitet betyder att förseglingen av kaviteten bibehålls under lång tid



6. FLUORSKYDD

- Avger hög mängd fluor som ger extra skydd i kaviteten



7. SÄKERT ATT ANVÄNDA

- Tolereras av patienter som är känsliga mot metall eller monomerer i resin



8. VERKLIGEN KLINISKT BEVISAT

- Analyserat i över 200 publicerade, artiklar och utdrag
- Kontinuerligt uppdaterade listor finns på vår hemsida



9. DEN GYLLENE STANDARDEN

- Överlägsna produkttegenskaper samt kliniskt dokumenterade bevis och erfarenhet gör Fuji IX GP till ett lågrisk, problemfritt glasjonomer fyllningsmaterial i din vardag
- Fuji IX GP har etablerat en kvalitetsnivå som våra konkurrenter vill nå



och med
ytterligare

1000

miljoner
anledningar. . .

- Har använts i gott och väl över 100 miljoner fyllningar över hela världen vilket bevisar att GC Fuji IX GP lever upp till vad det lovat vad gäller både tandläkare och patienter.

Har du råd att använda något annat?