

INTRODUKTION AV DE SENASTE
FRAMSTEGEN INOM

BIOAKTIVA

BULKFILL RESTAURATIONER

NYHET


Predicta™ bulk BIOACTIVE

- Stimulerar remineralisering och apatitformation: Materialet frigör mineraler (kalcium, fosfat och fluor) vilket stimulerar bildningen av ett skyddande lager mineralapatit; det definierade kravet på bioaktiva material.
- Obegränsat härdningsdjup säkerställer att de djupaste delarna av kompositen kommer ljushärdas.
- Idealisk tixotrop viskositet för adaption i kaviteten. Den lågviskösa (LV) versionen, alternativet för de som föredrar flytande bulkkomposit.
- Nanofiller för optimal hållbarhet, styrka och hög polerbarhet för estetiska resultat.
- Klinisk mångsidighet: Rekommenderas för Klass I, II, III, IV och V resturationer. Idealisk som bulkfill.
- Snabbt och lätt: Automix spruta 5 ml.
- Hög röntgenkontrast: Materialet identifieras lätt på röntgen.



Bildning av materialapatit


Svepmikroskåpanalys av ytor med Predicta komposit efter 28 dagar i simulerad kroppsvätska (SBS)

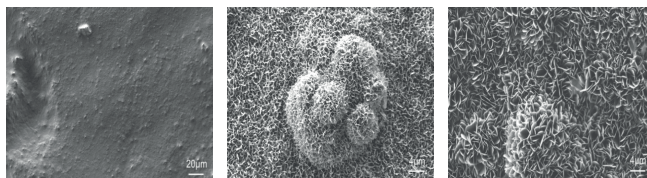

Vänster: Predicta kontroll, ingen SBF. **Mitten:** Predicta, 7 dagar i SBF. **Höger:** Predicta, 28 dagar i SBF

Predicta Bioactive Bulk är ett exempel på den senaste utvecklingen av restaurationsmaterial från Parkell. Det är ett bioaktivt, dualhärdande bulkfill komposit som frigör kalcium, fosfat och fluorjoner för att stimulera apatitkristallbildning och remineralisering i skarven mellan material och tand. Predicta Bioactive Bulk erbjuder en unik kombination av fysikaliska och kemiska egenskaper. Det är stabilt, med utmärkt styrka, tidseffektivt handhavande och optimalt utseende likt den naturliga tanden. Dessutom till skillnad från en del andra bioaktiva material har Predicta Bioactive Bulk hög röntgenkontrast som gör det lätt att identifiera på röntgen.

Hög radiopacitet: Jämförelse mellan Predicta Bioactive Bulk och Activa Restorative.

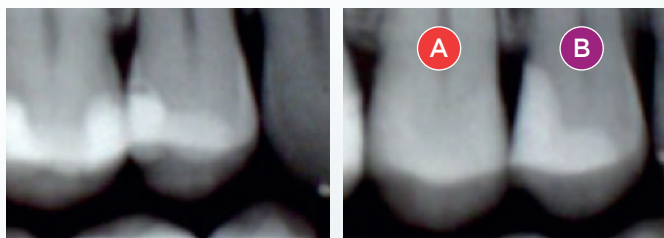

Röntgenbild före behandling av 1:a och 2:a premolaren med gamla restaurationer som kräver omgörning.

Röntgenbild som visar 2:a premolaren (A) behandlad med Activa Bioactive-Restorative och 1:a premolaren behandlad med (B) Predicta Bioactive Bulk

TILLGÄNGLIGA PRODUKTER

SKU#	PRODUKT BESKRIVNING	SHADE
S615	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill Paste	A1/B1
S616	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill Paste	A2/B2
S610	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill (LV) Paste	A1/B1
S611	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill (LV) Paste	A2/B2

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR

SKU#	PRODUKT BESKRIVNING
S620	5 ml Dispensing Gun
S621	17-Gauge Dispensing Tips (30pcs)
S622	19-Gauge Dispensing Tips (30pcs)



parkell®